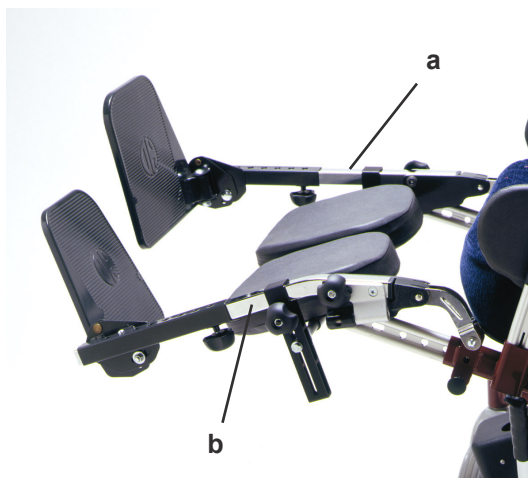


# Raka benstödsrör

**Infoblad nr. 18**


**BILD 1.** Rakt respektive standard benstödsrör monterade på rullstol.

## Raka benstödsrör

Raka benstödsrör (a) gör att foten kommer upp ca. 20 cm högre än med standardbenstöden (b) och kan tillsammans med tilten ge ett dränageläge. De raka benstöden har samma infästning som standardbenstöden. Bilden visar raka benstödsrör resp. standard benstödsrör i max uppinklat läge.

## Mått

Vinkel i knäled 120° - 170°

*Avstånd sitsdynans överkant - fotplatta*

Standard fotplattshållare 40 - 54 cm

Förlängda fotplattshållare 50 - 64 cm

## Mjukt knäledsskydd

Mjukt knäledsskydd träas på över benstödetets knäled som ett skydd om brukaren trycker/pressar sina ben utåt mot benstödens överdel.



**BILD 2.** Mjukt knäledsskydd

## Tänk på

Med raka benstödsrör kan inte benstöden vinklas ned till samma läge som standard benstöd. Förlängda fotstöd kan monteras på raka benstödsrör.

## Artikelnummer

### Art. nr. Benämning

16 750-5 Benstödsrör rak modell höger komplett (Ej vad-& fotstöd)

16 755-5 Benstödsrör rak modell vänster komplett (Ej vad-& fotstöd)

45 560 Polstring knäled komplett sats

## Vidare anvisningar:

Fotstöd (Standard, förlängt, avkortat) Se infoblad 13

Benstöd och separata vadstöd standard Se infoblad 11

## Reservdelslista / Sprängskiss : Blad D 3.1